


ソフトコンタクトレンズとレンズケア用品の適合性(相性)について

道玄坂永井眼科医院
院長 糸井素純

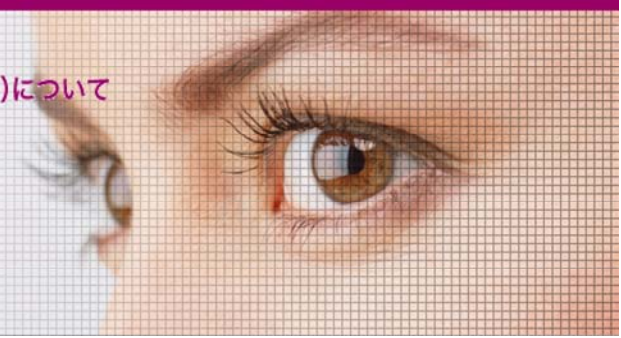

試験結果 ステイニング総スコア一覧

※試験は2006年から2009年にかけて実施し、この時期に市場に流通していたコンタクトレンズおよびレンズケア用品を用いています。

ステイニング・カラーコード

- 青: 0 ≤ ステイニング総スコア ≤ 1.0 (ステイニングはほとんど起きていない組合せ)
- 緑: 1.0 < ステイニング総スコア ≤ 2.5 (あまりステイニングが起きていない組合せ)
- 黄: 2.5 < ステイニング総スコア ≤ 4.0 (患者さんによっては中等度または強いステイニングが起きている組合せ)
- 赤: 4.0 < ステイニング総スコア (多くの患者さんで強いステイニングが起きている組合せ)

① 新品レンズを用いた試験

	生理食塩水 (陰性対照)	AOセプト	コンセプト ワンステップ	オプティ・ フリー プラス	オプティ・ フリー	レニュー マルチプラ ス	コンプリー ト 10min ^{※1} /コ ンプリー トブ ロテクト ^{※2}	ロートC キューブ ソフトワン モイスト ^{※3} / ソフトワ ンモイスト i ^{※4}	エピカ ール ^{※5} /エ ピカール ドアク アモア ^{※6}	フレッシュ ルック ケア 10min
0 ₂ オプティク ス	0.7	0.7	0.5	1.5	1.9	6.1	5.3 ^{※1}	5.7 ^{※3}	1.9 ^{※5}	4.8
アキュビ ュニア ドバンス	0.4	0.6	0.9	0.5	0.8	6.6	5.6 ^{※1}	7.3 ^{※3}	3.2 ^{※5}	5.5
アキュビ ュニア オアシス	0.7	0.5	0.6	2.0	3.9	3.4	2.7 ^{※1}	3.7 ^{※3}	1.7 ^{※5}	3.7
エアオプ ティク ス	0.9	0.5	1.0	1.2	1.7	6.7	2.8 ^{※2}	7.5 ^{※4}	1.5 ^{※6}	5.2
2ウィーク プレ ミオ	1.2	0.9	0.4	1.9	1.6	7.6	4.6 ^{※2}	6.8 ^{※4}	1.6 ^{※6}	4.7
消毒成分	—	過酸化水素		ポリクオ ッド (塩化ポリ ドロン ウム)		PHMB(塩酸ポリヘキサニド系)				

*「ロートCキューブ ソフトワンモイストi(※4)」は、「ロートCキューブ ソフトワンモイスト(※3)」にヒアルロン酸Naが配合された後継製品です(2009年4月発売開始)。